


참고1 자동심장충격기 점검내용 시스템 등록방법

□ ‘통합 응급의료정보 인트라넷’ 별도 로그인을 통한 점검 등록

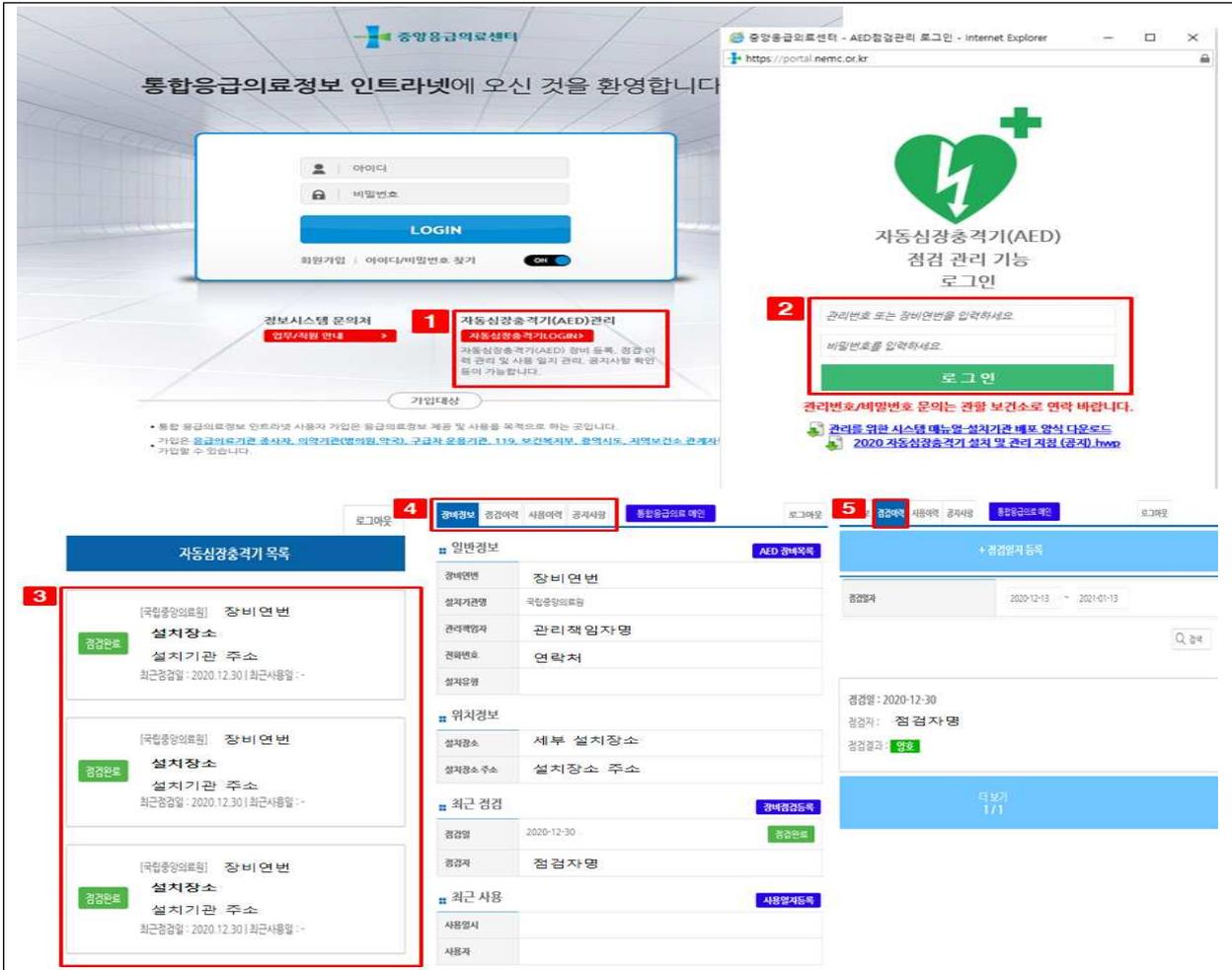

1 통합응급의료정보 인트라넷(<http://portal.nemc.or.kr>) 자동심장충격기 관리 로그인

2 점검 관리 기능 로그인 화면

- 아이디: 점검을 하고자 하는 설치기관 관리번호 혹은 장비연번 입력
 - 관리번호: 설치기관의 고유번호로, 설치기관 내 모든 장비 점검이력 관리 가능
 - 장비연번: AED기기의 고유번호로, 해당 장비의 점검이력만 관리 가능
- 비밀번호: 설치기관 정보입력 시 설정한 비밀번호로 동일

※ 관리번호(장비연번), 비밀번호는 관할 보건소 문의

3 설치된 자동심장충격기(AED) 목록

4 AED 장비정보·점검이력 및 사용이력, 공지사항 구분

5 점검이력 메뉴: 점검일지 등록 및 점검이력 검색 및 선택 화면

- 점검일지 등록 클릭 후 점검일지 작성: 작성법은 모바일 앱(app) 작성법과 동일(5쪽)

□ ‘모바일 앱(APP)’ 이용 점검 등록

○ 모바일 앱(app) 다운로드 받기




스마트폰 기종에 따라 '응급의료정보제공' 앱을 다운로드 받아 설치
 ◦ 안드로이드: Play 스토어, 애플: App Store

○ '응급의료 정보제공' 앱(app) 이용 점검

- 1 앱 최초 화면에서 클릭
- 2 업무포탈(의료인) :
AED관리, 구급차, 교육로그인 클릭
- 3 AED 아이디 및 비밀번호 입력

- 아이디: 점검을 하고자 하는 설치기관 **관리번호** 혹은 **장비연번** 입력
 - 관리번호: 설치기관의 고유번호로, 설치기관 내 모든 장비 점검이력 관리 가능
 - 장비연번: AED기기의 고유번호로, 해당 장비의 점검이력만 관리 가능
- 비밀번호: 설치기관 정보입력 시 설정한 비밀번호로 동일
 - ※ 관리번호(장비연번), 비밀번호는 관할 보건소 문의

- 4** AED 장비 선택하기: 장비연번 또는 설치장소로 구분
- 정보확인 또는 점검·사용이력을 남길 AED 선택

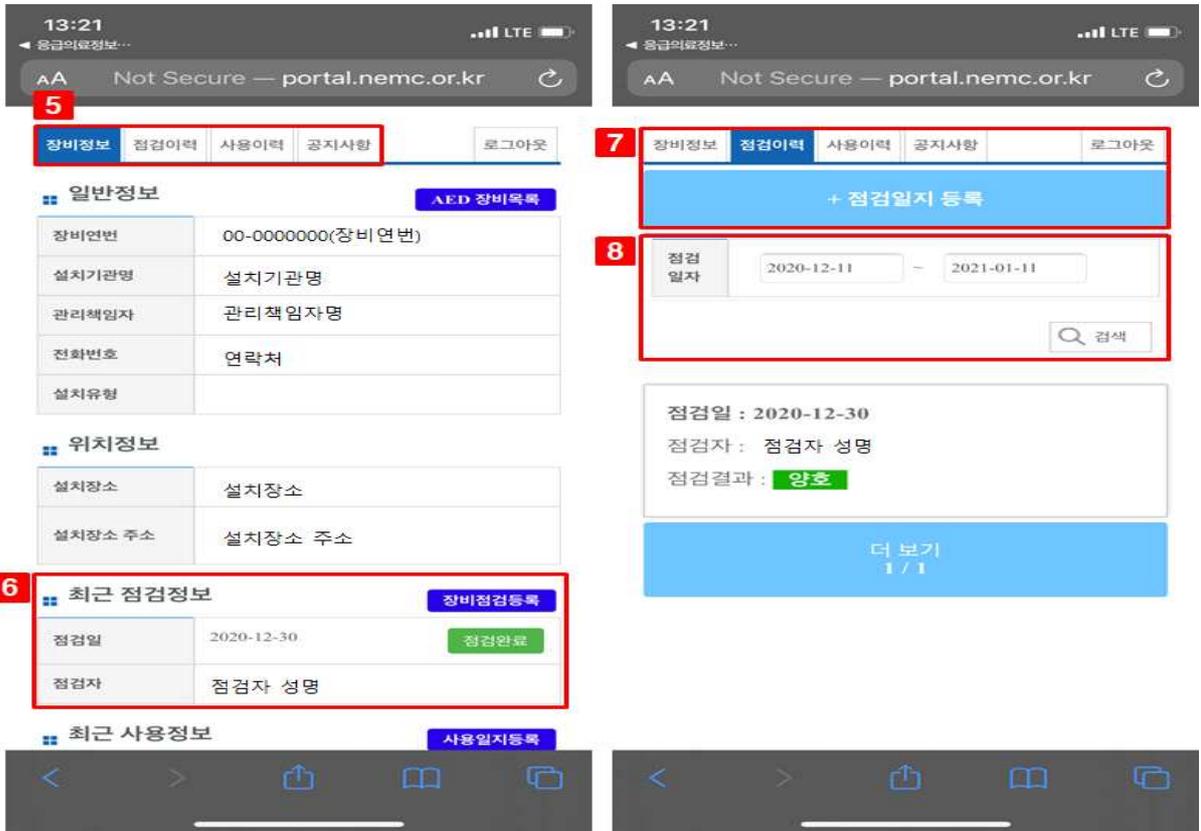

5 AED 장비정보·점검이력 및 사용이력 구분

구분	내용
장비정보	AED의 일반·위치정보 및 점검·사용정보 확인 가능
점검이력	점검 이력에 대한 확인 및 점검일지 등록 가능
사용이력	사용 이력에 대한 확인 및 사용이력 등록 가능
공지사항	자동심장충격기 관련 공지사항(보건복지부 지침 및 관리 시스템 변경사항 안내 등)

6 최근 점검정보: 최근 점검정보 확인 및 장비점검일지 등록 버튼


- 최근 점검일 및 점검자를 확인 가능
- **장비점검등록** 버튼 클릭 시 점검일지 등록화면으로 이동

7 '점검이력' 메뉴 선택 시 점검이력 관리 화면으로 전환

- **+점검일지 등록** 버튼 클릭 시 점검일지 등록화면으로 이동

- 8** 점검일자 입력 및 검색버튼 클릭 시 검색 기간 내 점검이력 확인 가능
- 검색된 결과는 점검일자 및 점검자 그리고 점검결과로 표시됨
 - 검색된 결과 클릭 시 점검일자 상세보기 화면으로 이동하여 점검 체크리스트 작성결과를 확인 및 수정할 수 있음

• AED 점검일자 등록 및 수정 방법

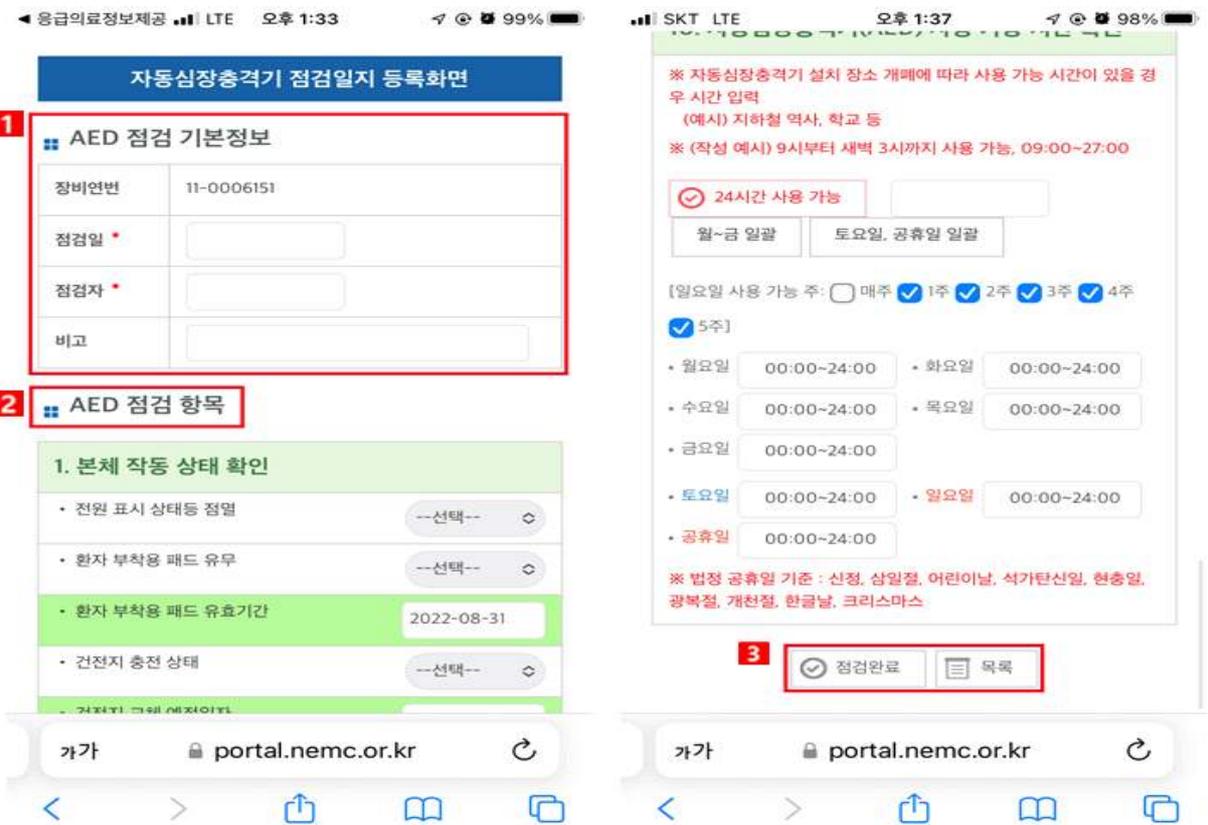

1 AED 점검 기본정보

- 점검일, 점검자 및 비고란 입력

2 점검 항목별 결과 입력

- 보건복지부 설치 및 관리 지침 내 '자체점검 체크리스트' 내용에 맞춰 구성되어, 항목별 점검사항을 확인 후 이상 유·무를 선택하여 입력

구 분	내 용
본체 작동 상태 확인	· 자동심장충격기(AED) 본체에 대한 점검상태 이력 확인 · 5가지 항목 '전원표시 상태등 점멸여부, 패드 유·무 및 유효기간, 배터리 충전 상태 및 교체 예정일자'로 구성
보관함 상태	· 보관함 상태 및 작동여부 등에 대한 점검이력 확인 · 5가지 항목 '도난경보장치 작동, 안내문구상태, 비상연락망 표시여부, 심폐소생술 안내책자 여부, 패드 및 배터리 유효기간 표시여부'로 구성
자동제세동기 위치안내 표시	· AED 설치 위치 안내 표시에 대한 점검이력 확인 · 27지 항목 '기관(건물)입구 안내 및 기관내 설치위치 및 방향 표시'로구성
관리서류 작성 및 비치 여부	· AED 관리서류의 작성 및 비치에 대한 점검이력 확인
관리자 변경 사항	· 기존 등록된 관리자 중 변경, 신규 관리책임자 추가는 서울행정시스템 연계정보를 통해서만 가능함
점검(교체) 여부 확인	· 자동심장충격기(AED) 본체 및 장비 부품 점검 및 교체 등으로 일시적으로 사용이 불가능한 경우 확인
장비 설치 위치 확인	· 자동심장충격기가 설치된 위치 좌표 수정/확인 가능 ※ 설치 또는 양도(양수), 이전 장비: 좌표 수정> “외부표출 하시겠습니까?”> “확인” 응답>외부 표출 ※ 구비의무기관의 경우 필수 표출됨. 다만, 점검(교체) 혹은 배터리 유효기간 초과 시 외부표출 제한됨.
장비 사용 가능시간 확인	· 설치기관의 운영시간, 즉 장비 접근 및 사용이 가능한 시간

3 점검완료 및 목록 버튼

- 점검내용을 모두 확인 및 입력 후 '점검완료(점검수정)' 버튼 클릭 시 점검내용이 저장됨
- '목록' 버튼 클릭 시 점검이력 목록 메뉴로 이동되며, 입력 또는 선택한 내용에 대해서는 저장되지 않음

참고2 자동심장충격기 사용 시 시스템 등록방법

□ '통합 응급의료정보 인트라넷' 별도 로그인을 통한 사용 등록

통합응급의료정보 인트라넷에 오신 것을 환영합니다.

중립응급의료센터 - AED점검관리 로그인 - Internet Explorer
 https://portal.nemc.or.kr:444/mobile/aed/mobile_aed_login_popup.do

자동심장충격기(AED) 점검 관리 기능 로그인

관리번호 또는 장비연번을 입력하세요.
 비밀번호를 입력하세요.
 로그인

관리번호/비밀번호 문구는 관할 보건소로 연락 바랍니다.
 관리를 위한 시스템 메뉴와 설치기관 배포 양식 다운로드
 2020 자동심장충격기 설치 및 관리 지침 (공지).hwp

• 통합 응급의료정보 인트라넷 주소: <http://portal.nemc.or.kr>

1 자동심장충격기(AED) 관리: 장비 등록, 점검 이력관리 및 사용일지 관리 등 확인

2 점검 관리 기능 로그인 화면

- 아이디: 설치기관 관리번호 혹은 장비연번 입력
 - 관리번호: 설치기관의 고유번호로, 설치기관 내 모든 장비 이력 관리 가능
 - 장비연번: AED기기의 고유번호로, 해당 장비의 이력만 관리 가능
 - 비밀번호: 설치기관 정보입력 시 설정한 비밀번호로 동일
- ※ 관리번호(장비연번), 비밀번호는 관할 보건소 문의

○ 사용한 장비 검색 및 사용일지 등록 메뉴 안내

로그아웃

자동심장충격기 목록

1

2

3

장비정보 | 점검이력 | **사용이력** | 공지사항 | 로그아웃

+ 사용일지 등록

조회 일자: 2022-03-28 ~ 2022-04-28

검색

조회된 목록이 없습니다.

• AED 사용일지 작성 절차

- 1** 사용한 자동심장충격기(AED) 장비 클릭
 - 관리번호로 로그인시 기관 내 등록되어 있는 장비가 모두 검색 됨
- 2** 사용이력 확인 및 사용일지를 등록할 수 있는 메뉴
- 3** '사용일지 등록'을 클릭하여 사용일지 등록화면 불러오기


○ 자동심장충격기 사용일지 등록화면

• 작성항목 중 (*) 표시는 필수 입력 값

- 1** 사용정보
 - 일시*: 실제 장비를 사용한 날짜 및 시간 입력
 - 사용자*: 일반인, 구급대, 의료진, 기타 중 해당사항 클릭
 - '기타'인 경우 텍스트로 사용자 정보 추가 입력 가능
 - 사용장소: 설치된 곳이 아닌 실제 사용한 장소
- 2** 이송정보
 - 병원 이송: 병원 이송 시 '유' 선택
 - '무' 선택시 이송방법 및 이송병원 비활성화
 - 이송방법: 119, 사설구급대, 보건소, 112, 자가용, 기타 중 해당사항 클릭
 - '기타'인 경우 텍스트로 사용자 정보 추가 입력 가능
 - 이송병원: 이송병원 정보를 아는 경우 작성
- 3** 환자정보
 - 환자명*: 모를 경우 '미상'으로 입력
 - 성별*: 성별에 맞게 클릭
 - 연령대*: 연령대 모를 경우 대략적인 연령대 추측하여 선택
 - 환자상태: 자동심장충격기 사용 전, 후의 환자 상태 작성
- 4** 일지등록 선택하면 저장 됨

□ '모바일 앱(APP)' 이용 사용 등록

○ 사용한 장비 검색 및 사용일지 등록 메뉴 안내

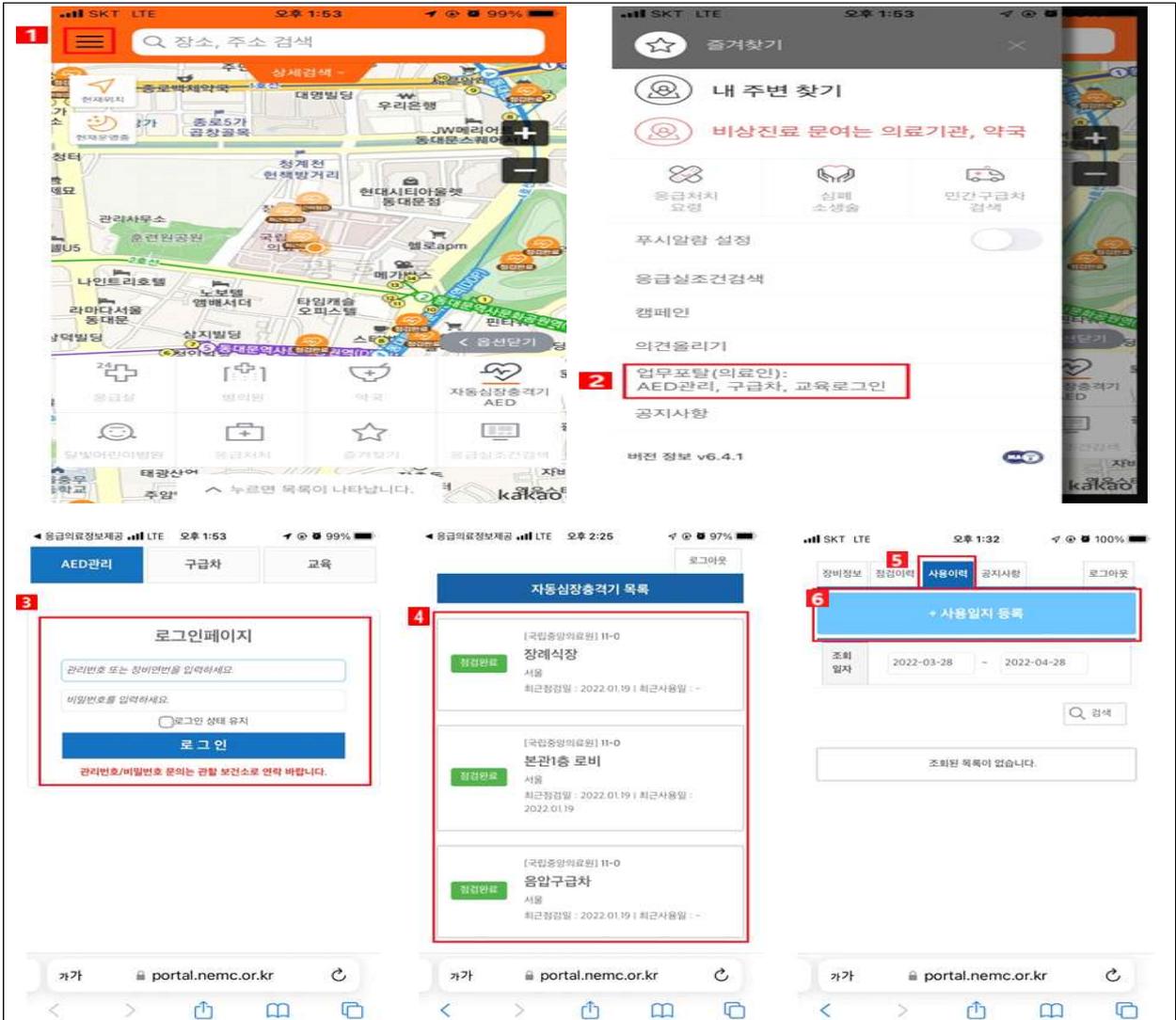


• AED 사용일지 작성 절차

- 1 앱 최초 화면에서 '☰' 클릭
 업무포탈(의료인) :
- 2 업무포탈(의료인) : AED관리, 구급차, 교육로그인 클릭
- 3 점검 관리 기능 로그인 화면
 - 아이디: 설치기관 관리번호 혹은 장비연번 입력
 - 관리번호: 설치기관의 고유번호로, 설치기관 내 모든 장비 이력 관리 가능
 - 장비연번: AED기기의 고유번호로, 해당 장비의 이력만 관리 가능
 - 비밀번호: 설치기관 정보입력 시 설정한 비밀번호로 동일
 - ※ 관리번호(장비연번), 비밀번호는 관할 보건소 문의
- 4 사용한 자동심장충격기(AED) 장비 클릭
 - 관리번호로 로그인시 기관 내 등록되어 있는 장비가 모두 검색 됨
- 5 사용이력 확인 및 사용일지를 등록할 수 있는 메뉴

6 '사용일지 등록'을 클릭하여 사용일지 등록화면 불러오기

○ 자동심장충격기 사용일지 등록화면

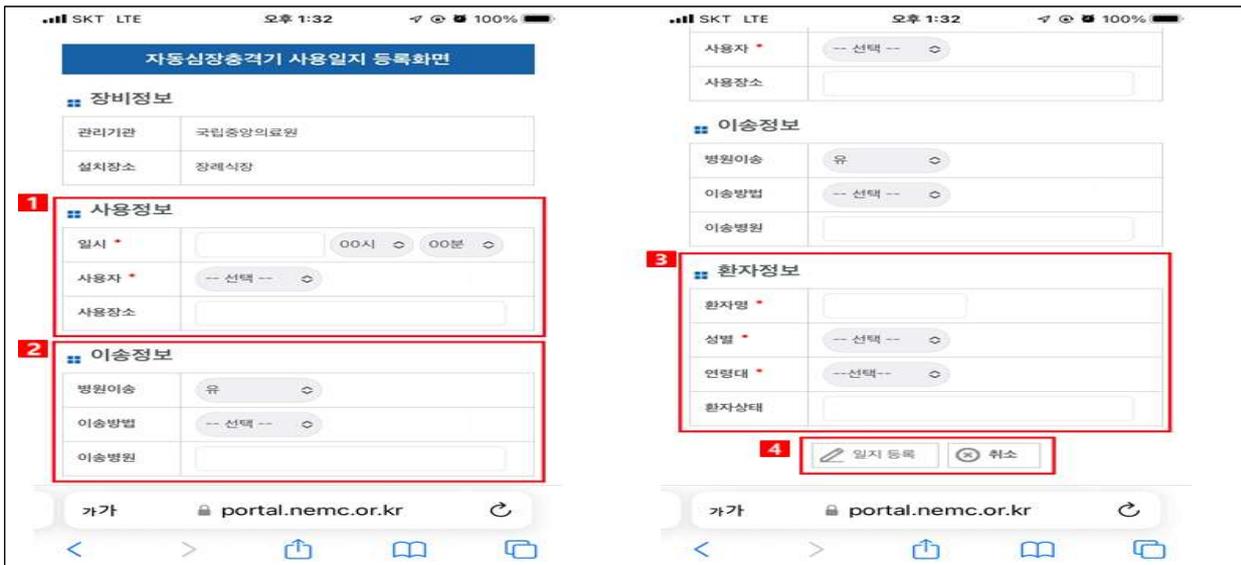

• 작성항목 중 (*) 표시는 필수 입력 값

1 사용정보

- 일시*: 실제 장비를 사용한 날짜 및 시간 입력
- 사용자*: 일반인, 구급대, 의료진, 기타 중 해당사항 클릭
· '기타'인 경우 텍스트로 사용자 정보 추가 입력 가능
- 사용장소: 설치된 곳이 아닌 실제 사용한 장소

2 이송정보

- 병원 이송: 병원 이송 시 '유' 선택
· '무' 클릭 시 이송방법 및 이송병원 비활성화
- 이송방법: 119, 사설구급대, 보건소, 112, 자가용, 기타 중 해당사항 클릭
· '기타'인 경우 텍스트로 사용자 정보 추가 입력 가능
- 이송병원: 이송병원 정보를 아는 경우 작성

3 환자정보

- 환자명*: 모를 경우 '미상'으로 입력
- 성별*: 성별에 맞게 클릭
- 연령대*: 연령대 모를 경우 대략적인 연령대 추측하여 선택
- 환자상태: 자동심장충격기 사용 전 후의 환자 상태 작성

4 일지등록 선택하면 저장 됨